

Health APP (Android) 使用说明书

目录

登录	3
注册	4
用户认证	5
查看设备信息	6
近一周佩戴时间统计	7
实时数据统计	8
数据同步	9
数据统计（全）	10
个人资料	11
设置	12
论坛	14
帖子详情 / 发布评论	15
查看消息 / 发送消息	16
医生查看和自己绑定的患者	18
医生查看患者详细信息	19

登录

输入正确手机号+密码即可登录 APP

勾选“下次自动补全手机号和密码”可以记住手机号+密码



The image shows a mobile app login screen. At the top, there is a status bar with icons for Bluetooth, Wi-Fi, cellular signal, and battery, along with the time 22:54. The main background is blue. In the center, there is a circular logo with a stylized white figure inside. Below the logo, there are two input fields: one for the phone number (labeled '手机号') and one for the password (labeled '密码'). The phone number field contains the text '13258382770'. The password field contains a series of dots. To the right of the password field is an eye icon. Below the input fields, there is a checkbox labeled '下次自动补全手机号和密码'. At the bottom, there are two buttons: '没有账号? 立即注册' and '登录'.

手机号
13258382770

密码
.....

☒ 下次自动补全手机号和密码


没有账号? 立即注册 登录

注册

患者注册需要填写：手机号+密码+确认密码；

医生注册需要填写：手机号+密码+密码确认+医生身份验证码。

注册成功后即可登录 APP

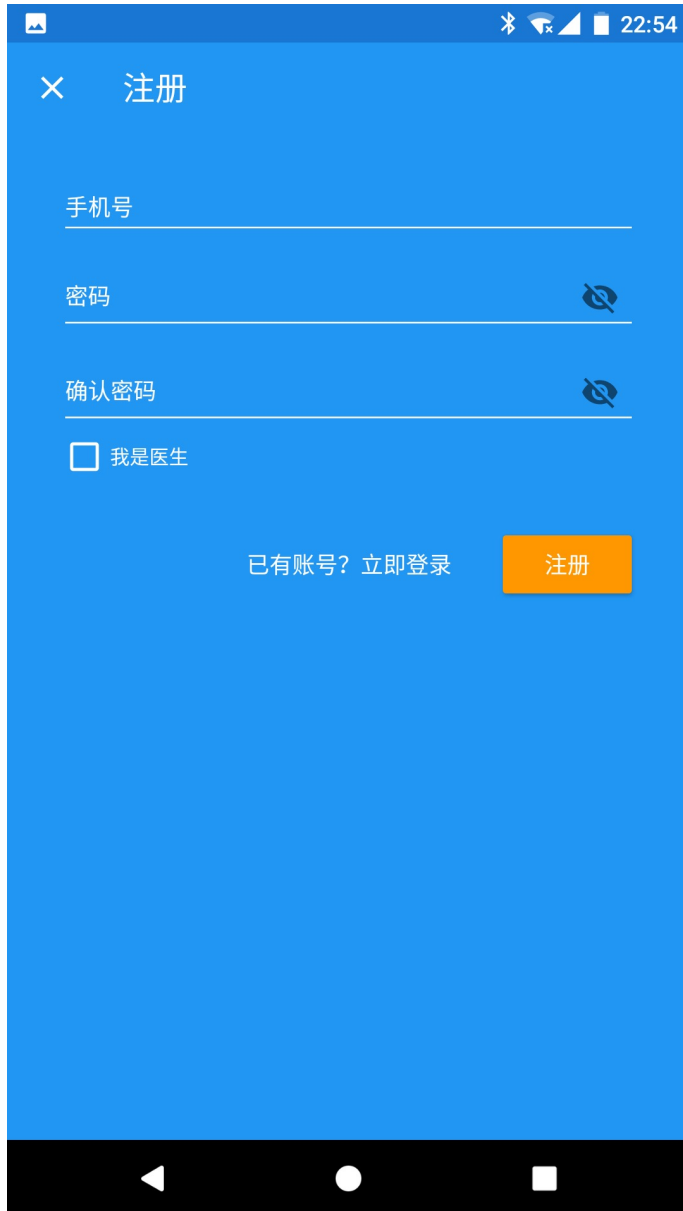A screenshot of a mobile application's registration screen. The screen has a blue background. At the top, there is a status bar with icons for Bluetooth, Wi-Fi, signal strength, and battery, along with the time 22:54. Below the status bar is a header bar with a close icon (X) and the title '注册'. The main area contains three input fields: '手机号' (Mobile Number), '密码' (Password), and '确认密码' (Confirm Password). Each password field has an eye icon to toggle visibility. Below these fields is a checkbox labeled '我是医生' (I am a doctor). At the bottom, there is a link '已有账号? 立即登录' (Already have an account? Log in immediately) and an orange '注册' (Register) button. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

用户认证

未认证的患者用户登录成功后需要进行用户认证。

根据 APP 提示打开，蓝牙功能，授予定位权限（Android 6.0 及以上），打开定位（Android 6.0 及以上）。进行搜索蓝牙 BLE 设备。

点击搜索到的设备后进行用户认证，认证成功后进入 APP。

查看设备信息

每次在连接上设备后，APP 会自动请求设备的基本信息并显示，包括：电量，存储空间剩余，设备系统时间。

如果自动请求失败，可手动下拉刷新。



近一周佩戴时间统计

APP 会根据本地数据库的记录绘制一周的佩戴时间统计,

下拉刷新可以重新绘制统计图



实时数据统计

连接到设备后，可点击“显示实时数据”右侧的开关来请求实时数据显示，在统计图下方有指示灯表示各个通道的舒适度情况




数据同步

APP 会根据本地数据的同步情况自动上传数据到数据库，当然，患者用户也可以通过点击页面右上方的“同步”按钮进行手动上传数据



数据统计（全）

点击首页 “本周统计” 右侧的“全部” 按钮可以进入数据统计页面。
选择右侧的下拉选框可以选择 “按天 / 周 / 月 / 年” 统计图

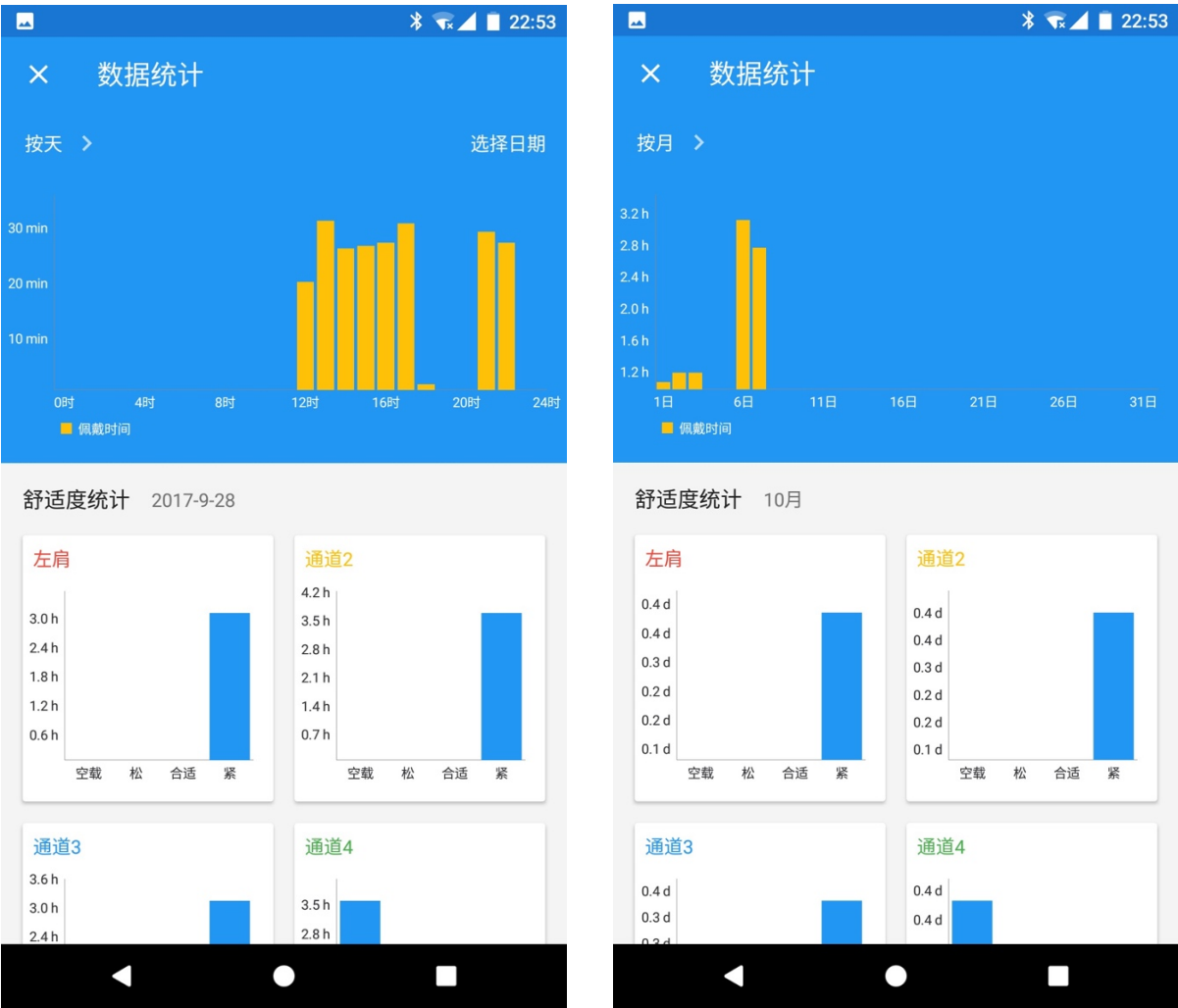

根据选择的类型不同，下方的舒适度统计也会响应地更新。

个人资料

点击抽屉导航栏中的 “我的” 可以查看个人资料
点击相应的项目，可以进行修改。



设置

点击抽屉导航栏中的 “设置”


点击 “定标” 可以进行定标操作

点击 “设置显示通道数” 可以设置显示的通道数量，默认为 4 个

点击 “通道命名” 可以为通道 1, 2, 3, 4 设置别名

另外可以限制 APP 只使用无线网络上传 / 下载数据，默认情况下可以使用移动网络和无线网络。

点击 “更换设备” 可以重新绑定新的设备

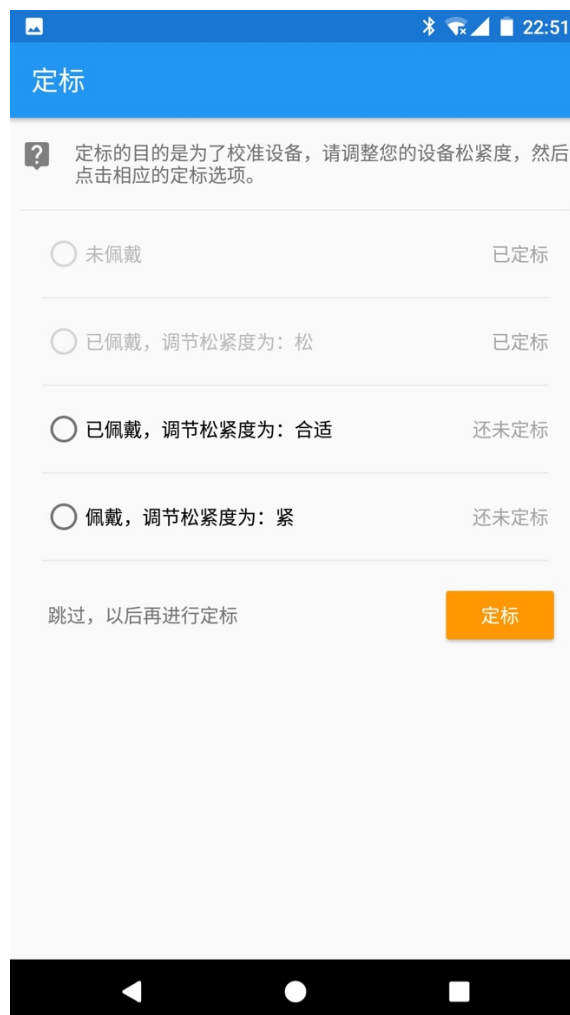



论坛

论坛首页显示帖子列表，下拉可刷新帖子，
点击页面右下角的 “+” 按钮可以发布帖子

点击帖子可以查看帖子详情



帖子详情 / 发布评论

帖子详情页面可以查看帖子的内容，以及作者和发布时间，评论列表

下拉可刷新帖子



查看消息 / 发送消息

患者用户可以查看医生发送的消息

医生用户可查看消息，可以给负责的患者发送消息（单发，群发）

医生用户点击页面右下角的“+”按钮可以选择多个患者进行群发消息





医生查看和自己绑定的患者

医生用户登录成功后，可以在首页查看和自己绑定的患者列表，下拉可刷新患者列表，点击相应的患者可以查看患者的详细信息。



医生查看患者详细信息

在患者详情页面，医生可以查看患者的基本信息，佩戴时间的数据统计，舒适度的数据统计（天，周，月，年）

